

Eleganza 2




Sairaa lasä nky akuuttiin hoitoon

Eleganza 2



30%

kaatumisista tapahtuu
sängystä noustessa

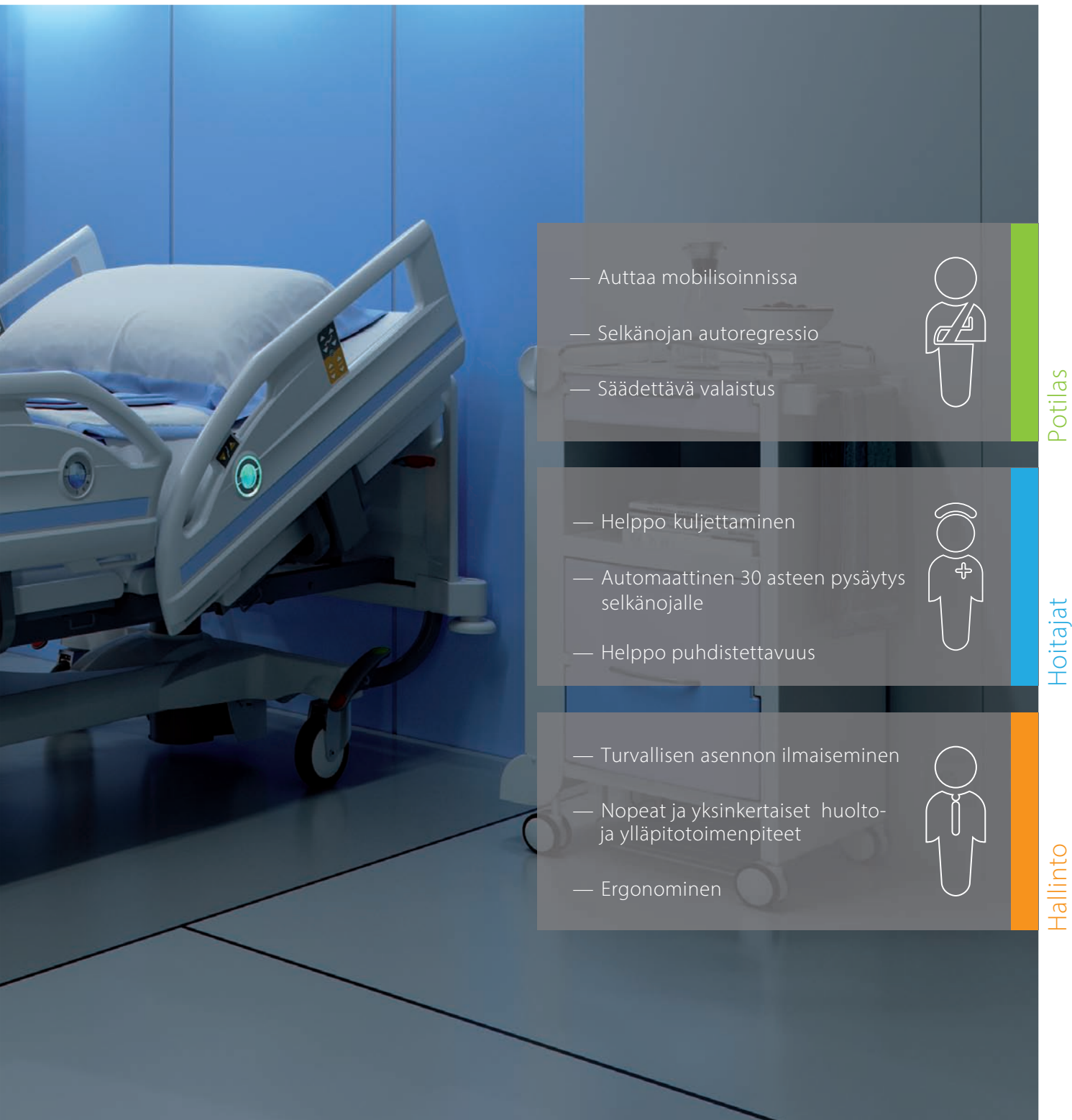

- Auttaa mobilisoinnissa
- Selkänojan autoregressio
- Säädetty valaistus



Potilas

- Helppo kuljettaminen
- Automaattinen 30 asteen pysäytys selkänojalle
- Helppo puhdistettavuus



Hoitajat

- Turvallisen asennon ilmaiseminen
- Nopeat ja yksinkertaiset huolto- ja ylläpitotoimenpiteet
- Ergonominen



Hallinto

Potilasturvallisuus




Eleganza 2 luo potilalle turvallisen ympäristön. Sivulaidat takaavat erinomaisen putoamiseneston sekä useat muut turvaominaisuudet tekevät Eleganza 2:sta erittäin turvallisen sairaalasängyn.

SAFEPlus
CONCEPT



PATENTOIDUT NESTETÄYTTEISET KULMAMITTARIT

Näyttävät tarkasti ja selkeästi selkänojan kallistuksen pääosan sivulaidoissa sekä sängyn kallistuksen jalkaosan sivulaidoissa.

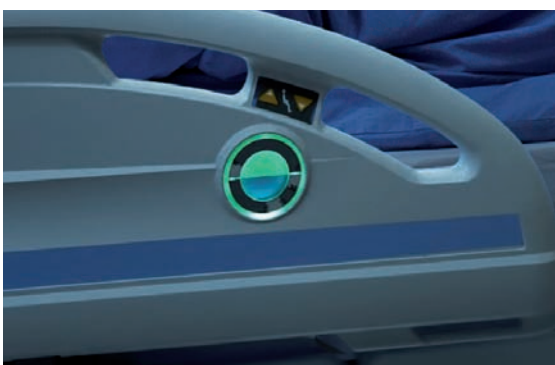

TURVALLISEN ASENNON ILMAISEMINEN

Kulmamittarit voidaan varustaa taustavalolla, joka muuttuu vihreäksi kun sänky on turvallisessa asennossa eli alimmassa asennossaan.



YÖVALO

Alarunkoon sijoitettu yövalo auttaa sängyn kuljettamisessa pimeillä käytävillä.



BRAKEAlarm))


JARRUHÄLYTIN

Sänky voidaan varustaa jarruhälyttimellä, joka antaa äänellisen signaalin, jos sänky jätetään jarruttamatta kun se on kiinni verkkovirrassa.

Potilasmukavuus

MUKAVUUS

parantaa potilaan henkistä hyvinvointia ja nopeuttaa kuntoutumista. Eleganza 2 -sairaalasängyn patja-alusta on suunniteltu mukavuutta silmällä pitäen.

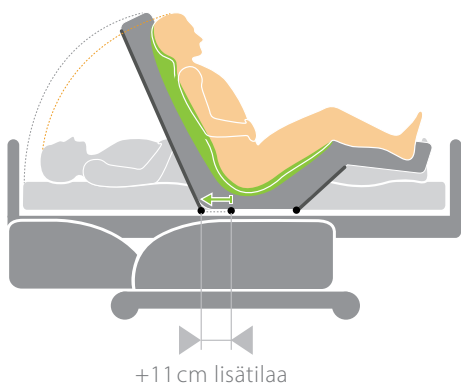

PAINEHAAVOJEN EHKÄISEMINEN SELKÄNOJAN AUTOREGRESSIOLLA

Nostettaessa sänkyä istuma-asentoon, selkänoja liukuu taaksepäin luoden 11cm lisätilaa potilaan lantion alueelle. Autoregressio vähentää painetta sekä kitkavoimia ja siten ehkäisee painehaavojen syntymistä.

SÄNGYN PIDENNYS

Sänkyä on mahdollista pidentää manuaalisesti 32cm jalkopäädystä. Näin Eleganza 2 on erittäin mukava myös pidemmille potilaille. Patja-alusta on 90cm leveä, mikä tekee siitä tilavan ja mukavan potilaalle.



Potilaan mobilisointi



MOBILISOINNIN AVUSTUS

Sivulaidan alle jäävä lisätila helpottaa mobilisointia. Lisätila auttaa potilasta asettamaan jalkansa suoraan painopisteensä alle mahdollistaen helpon nousemisen vähemmällä vaivalla.



ITSENÄISYYTTÄ JA NOPEAMPI MOBILISOINTI



RASKAS TYÖ HELPOMPAA



VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA JA KAATUMISRISKIÄ

MOBILIFT®

Sivulaitaan integroitu Mobilift-näppäin säättää sängyn korkeutta mahdollistaen mukavan ja turvallisen nousemisen mobilisaation aikana.

Hoitotyön auttaminen



VIIDES PYÖRÄ

Lukittava viides pyörä sängyn keskellä helpottaa sängyn ohjaamista pitkillä matkoilla. Viides pyörä voidaan lukita suoraan jarruvivuilla, mikä estää sivuttaisliikkeen kuljetuksen aikana sekä pienentää sängyn kääntökulmaa. Kaikki pyörät voidaan vapauttaa sängyn sivuttain liikuttelun mahdollistamiseksi

KAHVAT SÄNGYNPÄÄDYISSÄ

Sängynpäättyihin muotoillut kahvat tekevät sängyn liikuttelemisesta ergonomista. Kahvat mahdollistavat tarttumisen vaakatasossa tai pystysuunnassa.



INFEKTIOIDEN ESTO

Sängyn patja-alusta koostuu helposti irrotettavista ja helposti puhdistettavista palasista. Patja-alustan osiin muotoillut urat ohjaavat patja-alustalle valuvat nesteet turvallisesti pois. Lisäksi urat mahdollistavat paremman ilmankierron patjoissa.



RÖNTGENSÄTEITÄ LÄPÄISEVÄ SELKÄNOJA

Sänky voidaan varustaa röntgensäteitä läpäisevällä selkänojalla sekä röntgenkasetin paikalla. Sängyn avulla voidaan ottaa thorax-röntgenkuva potilasta siirtämättä.



AKKUTOIMINTO

Eleganza 2 on varustettu akulla, jolloin sänkyä on mahdollista säätää ilman verkkovirtaa esimerkiksi kuljetuksen aikana tai virtakatkoksen sattuessa.




Helppo sängyn hallinta






AUTOMAATTINEN 30° SELKÄNOJA

Selkänoja pysähtyy automaattisesti 30 asteen kulmaan. Tämä asento on optimaalinen hengityksen helpottamiseksi.

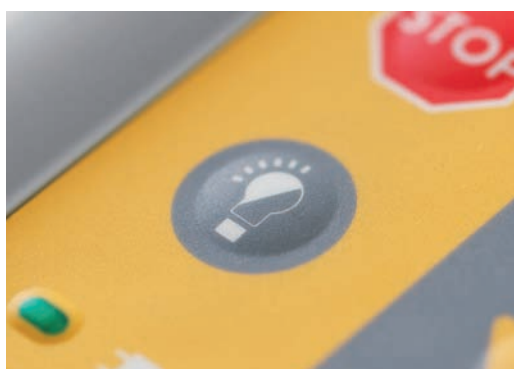


VALAISTUKSEN SAMMUTTAMINEN

Sängyn taustavalaistus - yövalo, kulmamittarit, käsiohjain sekä sivulaitaan integroidut näppäimet - voidaan sammuttaa sängyn hallintalaitteesta.

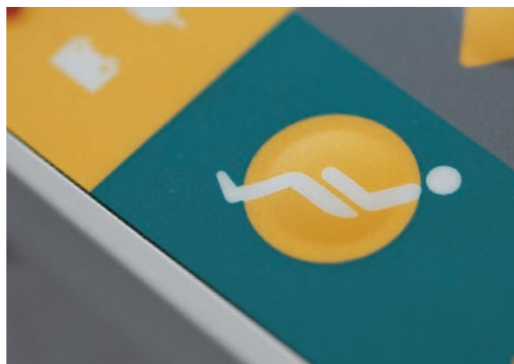

CARDIAC CHAIR -TUOLIASENTO

Cardiac Chair -tuoliasento lieventää painetta vatsan alueella ja siten helpottaa hengittämistä sekä mahdollistaa ylimääräisten hengityslihasten käytön. Tuoliasento on helppo asettaa vain yhtä näppäintä painamalla.

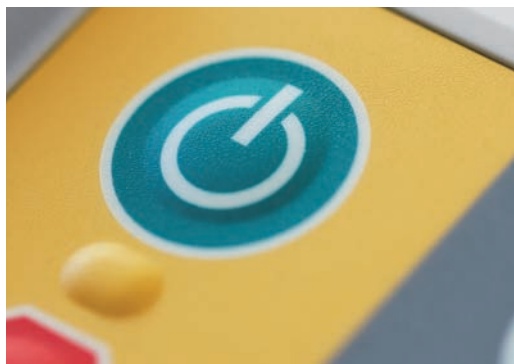

AKTIVOINTINÄPPÄIN

Tahattoman käytön ehkäisemiseksi sängyn hallintalaitteet lukkiutuvat kolmen minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta. Painamalla aktivointinäppäintä hallintalaitteet saadaan taas käyttöön.

Sängyn ominaisuudet

- 1** Jalkahallintalaitteet
Sängyn korkeutta voidaan säätää valinnaisilla jalkahallintalaitteilla ilman käsiä.
- 2** Törmäyssuojat
Pyörivät puskurit kulmissa suojaavat sänkyä.
- 3** Patja-alusta
Helposti puhdistettava patja-alusta on yhteensopiva 86 ja 90cm leveiden patjojen kanssa.
- 4** Liinavaateteline
Teline sängyn jalkopäässä auttaa sängyn petaamisessa tarjoamalla paikan mihin laskea puhtaat liinavaatteet.
- 5** Selkänojan vapautin
Selkänoja voidaan vapauttaa mekaanisesti hätätilanteen sattuessa.
- 6** Kolumnirakenne
Sängyn kolumnirakenne on helppo puhdistaa ja tekee sängyn alaosaan erittäin tilavan.



Sähkömääritelmät

Virransyöttö	±10 % 230 V
Maksimisisäntulo	max 1,6 A; 370 VA
Suojausluokka	IPX4 (Luokan 1 maadoitus)



Tekniset tiedot

Ulkomitat	99,5 × 223 cm	Sivulaitojen korkeus	40,5 cm
Sängyn pidennys	32 cm	Sängyn paino	140 kg
Sängyn korkeussäätö	39,5–77,5 cm	Turvallinen työkuorma (SWL)	250 kg
Patja-alustan mitat / (soveltuvat patjan leveydet)	200 × 90 cm / (90 ja 86 cm)	Potilaan maksimipaino	185 kg
		Autoregressio	11 cm
Patjan maksimikorkeus puhallusmuovatuilla patja-alustalla	14 cm	Selkänöjan maksimikulma	62°
		Reisituen maksimikulma	34°
		Säärituen kulma	21°
Patjan maksimikorkeus ABS- patja-alustalla	18 cm	Trendelenburg-kallistus	16°/16°
		Nousutelineen maksimikuormitus	75 kg
		Alarungon maavara	15 cm

Eleganza 2

Potilas

- Auttaa mobilisoinnissa
- Selkänöjan autoregressio
- Säädettyvä valaistus



- Helppo kuljettaminen
- Automaattinen 30 asteen pysäytys selkänöjalle
- Helppo puhdistettavuus



Hoitajat

Hallinto

- Turvallisen asennon ilmaiseminen
- Nopeat ja yksinkertaiset huolto- ja ylläpitotoimenpiteet
- Ergonominen



Jakelija:

Conimex Oy
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki
info@conimex.fi
www.conimex.fi