



Eleganza 1

Yleiskäyttöinen sairaalasänky



Yleiskäyttöinen sairaalasänky

Eleganza 1 | Eleganza 1 –sänky on suunniteltu vuodeosastoille sekä pitkäaikaishoitoyksiköille. Sängyn rakenne on yksinkertainen ja sisältää laajan kirjon ominaisuuksia sekä toimintoja erittäin hyvällä hinta-laatusuhteella toteutettuna. Eleganza 1 tarjoaakin edulliseen hintaan monipuoliset ominaisuudet ja edistyselliset toiminnot poikkeuksellisen laajalle asiakaskunnalle.

MONIPUOLISESTI LISÄVARUSTEITA

Eleganza 1 -sairaalasänkyyn on saatavilla monia eri lisävarusteita. Sänky voidaan siten varustaa jokaisen osaston yksilöllisiin tarpeisiin. Sänkyyn on saatavilla esimerkiksi seuraavat lisävarusteet:

- Lukittava viides pyörä
- Patja-alustan pidennys
- Tuplapyörät
- Liikuteltava hallintapaneeli hoitajalle
- Liinavaateteline
- Sivulaitojen lisäpalat

PAINEHAAVOJEN EHKÄISEMINEN

Patja-alustan Ergoframe-rakenne luo lisätilaa potilaan lantion alueelle selkänojaa ja/tai reisitukea käytettäessä, jolloin vältetään potilaan puristuminen patja-alustan osien väliin. Tämä uniikki rakenne vähentää myös kitkavoimia patja-alustan myötäillessä kehon osien liikettä. Eleganza 1 soveltuu myös käytettäväksi aktiivipatjojen kanssa riittävän korkeiden sivulaitojensa ansiosta.



TEKNISET TIEDOT

Ulkomitat	99x218cm
Patjan mitat	200x86/90cm
Alarungon korkeus	16/18,8cm
Patja-alustan korkeudensäätö	37–73,5/39,5–76,8cm
Sängyn pidennys	15cm
Sivulaitojen korkeus	39cm
Patjan maksimikorkeus	16cm
Turvallinen työkuorma	250kg
Sängyn paino	135kg riippuen lisävarusteista
Selkänojan kulma	0–70°
Reisituen kulma	0–39°
TR/Anti-TR kulma	0–15°

SÄNGYN KULJETTAMINEN

- Lukittava viides pyörä sängyn keskellä helpottaa sängyn ohjaamista pitkillä matkoilla
- Viides pyörä voidaan lukita suoraan jarruvivulla, mikä estää sivuttaisliikkeen kuljetuksen aikana sekä pienentää sängyn kääntökulmaa
- Mikäli sänkyä ei ole varustettu viidennellä pyörällä, sängyn vasen etupyörä voidaan lukita suoraan jarruvivun avulla
- Sängynpäättyihin on muotoiltu kätevät kahvat tukevan otteen saamiseksi
- Kaikki pyörät voidaan vapauttaa sängyn sivuttain liikuttelun mahdollistamiseksi
- Eleganza 1 on mahdollista varustaa akulla, jolloin sänkyä voidaan käyttää verkkovirrasta irrotettuna myös kuljetuksen aikana



TEHOKAS TUOLIASENTO

Cardiac Chair -asento yhdistää korkean Fowler-asennon ja paineen lievennyksen vatsan alueella. Näin mahdollistetaan hengityksen helpottaminen sekä ylimääräisten hengityslihasten käyttö.

- Tuoliasento on helppo asettaa vain yhtä näppäintä painamalla
- Sänky nostaa samanaikaisesti selkänojan, reisituen sekä tekee anti-Trendelenburg asennon
- Selkänoja saadaan erittäin pystyyn asentoon
- Patja-alustan Ergoframe-rakenne luo lisätilaa lantion alueelle ehkäisten puristus- ja kitkavoimia

PATJA-ALUSTAN PIDENNYS


- Patja-alustan jalkopätyyn mahdollista integroida pidennys
- Pidennys jopa 15cm (200cm + 15cm)

90cm LEVEÄ PATJA-ALUSTA

- Patja alustan leveys 90cm ja turvallinen työkuorma 250kg
- Leveä patja-alusta luo mukavuutta potilaalle
- Patja-alusta helposti puhdistettavissa irroitettavien palasten ansiosta

ERGOFRAME-RAKENTEN VAIKUTUKSET

- Vähentää painetta lantion ja ristiselän alueella sänkyä säädettäessä
- Ylläpitää hapensaantia keuhkoihin
- Vähentää painehaavojen riskiä lantion ja lapaluiden alueella
- Tekee sängystä mukavan potilaalle kaikissa asennoissa, mukaan lukien istuma-asento
- Ehkäisee vatsaontelon sisäelimiin kohdistuvasta paineesta johtuvia komplikaatioita
- Takaa päälle jatkuvan tuen

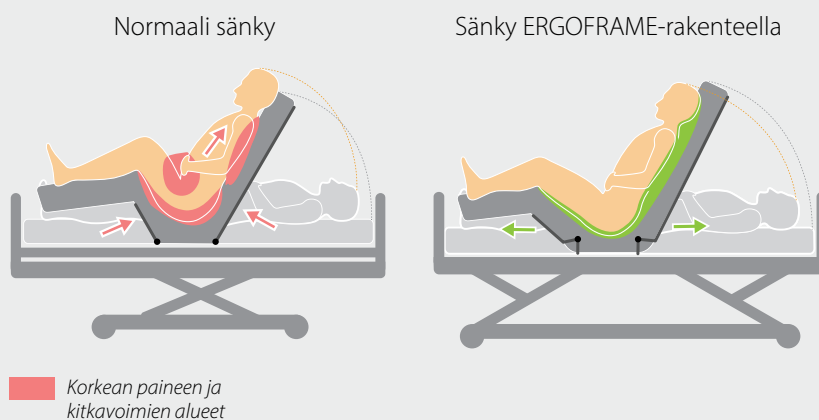

Eleganza 1

Yleiskäyttöinen sairaalasänky



Jakelija:

Conimex Oy
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki
www.conimex.fi
info@conimex.fi