




Image 3

Yleiskäyttöinen sairaalasänky matalalla korkeudella

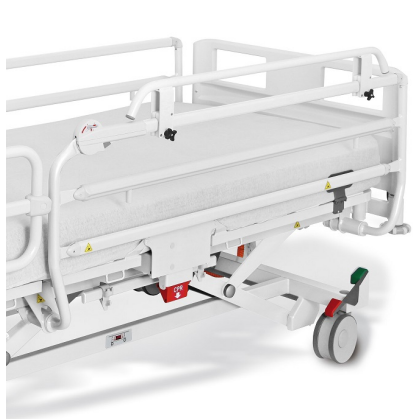

Monipuolisesti ominaisuuksia

Image 3 | Sängyssä on runsaasti ominaisuuksia kuten tehokas tuoliasento, viides pyörä ja matala korkeus. Lisäksi Image 3:en on saatavilla monipuolisesti lisävarusteita, joten sänky voidaan muokata jokaisen osaston yksilöllisiin tarpeisiin.

MATALIN KORKEUS 28cm

Image 3:n patja-alusta voidaan säätää jopa 28cm korkeuteen lattiasta näin vähentäen merkittävästi sängystä putoamisen riskiä etenkin yöllä.

- Matala korkeus suojaa potilasta loukkaantumisilta
- Image 3 luo turvallisen ympäristön potilaille, joilla on korkea putoamisen riski.
- 28cm korkeus mahdollinen 12,5cm pyörillä. (Viidennen pyörän kanssa vain 15cm pyörät mahdolliset, jolloin matalin korkeus 30cm.)

PAINEHAAVOJEN EHKÄISEMINEN

Patja-alustan Ergoframe-rakenne luo lisätilaa potilaan lantion alueelle selkänojaa ja/tai reisitukea käytettäessä, jolloin vältetään potilaan puristuminen patja-alustan osien väliin. Tämä uniikki rakenne vähentää myös kitkavoimia patja-alustan myötäillessä kehon osien liikettä. Image 3 soveltuu myös käytettäväksi aktiivipatjojen kanssa riittävän korkeiden sivulaitojensa ansiosta.



SÄNGYN KULJETTAMINEN

- Lukittava viides pyörä sängyn keskellä helpottaa sängyn ohjaamista pitkillä matkoilla
- Viides pyörä voidaan lukita suoraan jarruvivulla, mikä estää sivuttaisliikkeen kuljetuksen aikana sekä pienentää sängyn kääntökulmaa
- Sängynpäättyihin on muotoiltu kätevät kahvat tukevan otteen saamiseksi
- Kaikki pyörät voidaan vapauttaa sängyn sivuttain liikuttelun mahdollistamiseksi
- Image 3 on varustettu akulla, jolloin sänkyä voidaan käyttää verkkovirrasta irrotettuna myös kuljetuksen aikana


TEKNISET TIEDOT

Ulkomitat	104x220cm
Patjan mitat	200x86/90cm
Alarungon korkeus	13/15.5cm
Patja-alustan korkeudensäätö	28–80/30–82cm
Sängyn pidennys	10, 22, 32cm
Sivulaitojen korkeus	39cm
Patjan maksimikorkeus	17cm
Turvallinen työkuorma	250 kg
Sängyn paino	145 kg riippuen lisävarusteista
Selkänojan kulma	0–70°
Reisituen kulma	0–34°
TR/Anti-TR kulma	0–14°

TEHOKAS TUOLIASENTO

Cardiac Chair -asento yhdistää korkean Fowler-asennon ja paineen lievennyksen vatsan alueella. Näin mahdollistetaan hengityksen helpottaminen sekä ylimääräisten hengityslihasten käyttö.

- Tuoliasento on helppo asettaa vain yhtä näppäintä painamalla
- Sänky nostaa samanaikaisesti selkänojan, reisituen sekä tekee anti-Trendelenburg asennon
- Selkänoja saadaan erittäin pystyyn asentoon
- Patja-alustan Ergoframe-rakenne luo lisätilaa lantion alueelle ehkäisten puristus- ja kitkavoimia

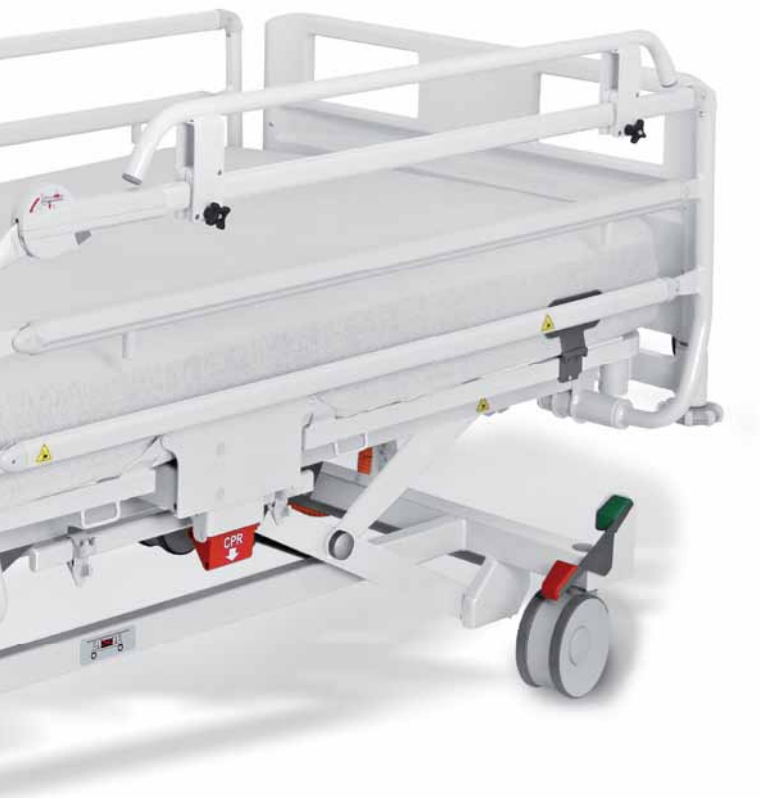

TUKEVA RAKENNE

- Sängyn runko on tehty vakaaksi ja tukevaksi
- Matalin asento: patja-alusta 28cm lattiasta
- Valinnaiset tuplapyörät tekevät sängystä entistä tukevamman liikuttaa

PATJA-ALUSTAN PIDENNYS

- Patja-alustan jalkopäädyssä integroitu pidennys
- Pidennys jopa 32cm (200cm + 32cm)
- Kolmiportainen pidennys

90cm LEVEÄ PATJA-ALUSTA

- Patja alustan leveys 90cm ja turvallinen työkuorma 250kg
- Leveä patja-alusta luo mukavuutta potilaalle
- Patja-alusta helposti puhdistettavissa irroitettavien palasten ansiosta

ERGOFRAME-RAKENTEEN VAIKUTUKSET

- Vähentää painetta lantion ja ristiselän alueella sänkyä säädettäessä
- Ylläpitää hapensaantia keuhkoihin
- Vähentää painehaavojen riskiä lantion ja lapaluiden alueella
- Tekee sängystä mukavan potilaalle kaikissa asennoissa, mukaan lukien istuma-asento
- Ehkäisee vatsaontelon sisäelimiin kohdistuvasta paineesta johtuvia komplikaatioita
- Takaa päälle jatkuvan tuen

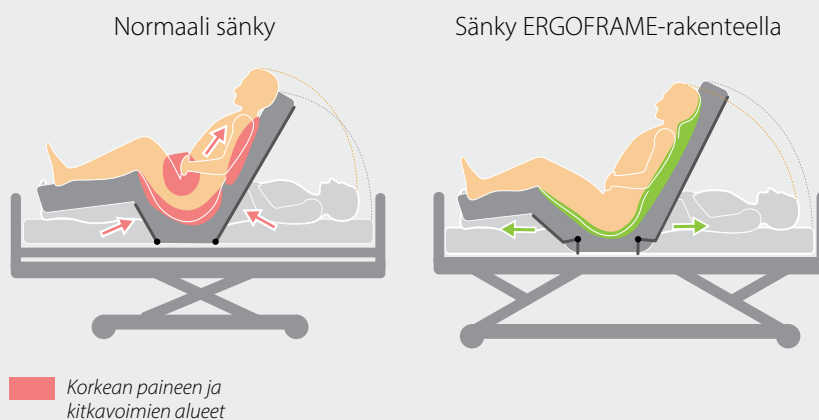


Image 3

Yleiskäyttöinen sairaalasänky matalalla korkeudella



Jakelija:

Conimex Oy
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki
www.conimex.fi
info@conimex.fi